



PERSONAL CARE

Smart Body Fat Scale



Brugsvejledning DK: 2-11

INDHOLD

SPECIFIKATIONER.....	2
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER	3
GENERELT	4
APP-INDSTILLINGER.....	5
FORBINDELSE	5
LOG IND I AIRSCALE-APPEN.....	6
KOM GODT I GANG MED AIRSCALE.....	7
SÅDAN VEJER DU DIG	8
FEJLVISNINGER.....	10
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	10
REKLAMATIONSRET OG SERVICE	11



SPECIFIKATIONER

- Maks. kapacitet: 180 kg / 390 lb
- Min. kapacitet: 8 kg / 17,6 lb
- Måleinterval: 0,1 kg / 0,2 lb
- Enhed: kg, lb
- Strøm: 3 × 1,5V AAA-batterier (medfølger ikke)

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs venligst hele brugsanvisningen, inden produktet tages i brug. På den måde beskyttes brugeren, og man undgår skade på produktet.
- Inden produktet tages i brug, fjernes al emballage og det undersøges, om produktet er beskadiget. Hvis produktet er beskadiget, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet har en skade, kontaktes den butik, hvor produktet er købt. Du må IKKE tage produktet i brug, hvis det er beskadiget.
- Brug ikke vægten til andet end det tiltænkte formål. Garantien bortfalder i tilfælde af anvendelse af vægten til formål, som ikke er beskrevet i brugsvejledningen.
- Produktet kan bruges af børn fra en alder på 8 år og af personer med begrænsede, fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring/viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af produktet og har forstået de dermed forbundne farer.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.
- FARE! Emballage skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning!
- FORSIGTIG! Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere produktet.
- Stil vægten på et fast, jævnt underlag. Brug aldrig vægten på et glat eller vådt underlag.
- Håndter vægten med forsigtighed. Undgå at belaste vægten, når du ikke foretager en vejning, og placer ikke genstande på vægten.
- Beskyt vægten mod fugt.
- Sørg for, at vægten ikke bliver gennemvædet af vand, da dette kan beskadige elektronikken.
- Brug ikke kemiske rengøringsmidler.
- Rengør vægten med en let fugtig klud, men sørg for, at der ikke kommer vand ind i vægten.
- Træd ikke på vægten med våde fødder eller våd krop.
- Stil dig aldrig på kanten af vægten, for at undgå fald. Stil dig altid midt på vægtsfladen – hold balancen.
- Vægten er højpræcisions-måleudstyr. Hop eller tramp ikke på vægten. Forsøg ikke at skille vægten ad. Håndter vægten forsigtig, så den ikke går i stykker, når den flyttes.
- Anbring ikke tunge ting på vægten, når den ikke er i brug.
- Overskrid ikke maks.-belastningen på vægten.
- Undgå stærke påvirkninger, kraftig varme, kulde eller vand, eller pludselige rystelser. Vægten er en sart konstruktion, der er følsom over for alle utilsigtede udefrakommende påvirkninger.
- Pga. kontinuerlige forbedringer, forbeholder producenten sig retten til at foretage produktændringer uden forudgående varsel

GENERELT

- Brug vægten med bare fødder. Brug ikke sokker. Vægten må kun bruges med bare fødder. Brug af sokker kan forhindre korrekt kontakt med elektroderne.
- Sørg for, at fødderne er tørre og rene. Sørg for, at dine fødder er tørre og rene for at sikre optimal kontakt med elektroderne og præcise målinger.
- Bliv stående på vægen, mens den analyserer.
- Kropsanalyseværdierne er ikke pålidelige for visse brugergrupper:

Bemærk: Måling af kropsfedt er ikke pålidelig hos følgende brugergrupper:

- Børn under 10 år og ældre over 80 år
- Atleter og bodybuildere
- Personer, der er i gang med en streng diæt, har drukket alkohol, lige har dyrket hård motion, tager visse typer medicin (f.eks. vanddrivende) eller er syge eller menstruerende.

2

APP-INDSTILLINGER

Kompatibelt smartphonesystem

Android 12.0 eller nyere

iOS 14.0 eller nyere

Download og installer APPen

iPhone: Søg efter "AIRSCALE" i App Store

Android: Søg efter "AIRSCALE" i app-butikker såsom (SAMSUNG Store, HUAWEI Store, XIAOMI Store, OPPO Store, VIVO Store osv.)


Følg softwarevejledningen for at downloade og installere app'en.

**FORBINDELSE**

Sørg for, at Bluetooth og lokalitetstjenester er aktiveret.

Åbn appen, og forbindelsen sker automatisk.

LOG IND I AIRSCALE-APPEN

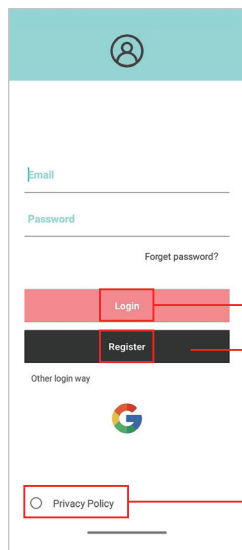

• Login


Indtast din e-mailadresse og adgangskode, hvis du allerede har en AIRSCALE-konto. Du kan også logge ind med din Google-konto.

• Registrering

Hvis du ikke har en eksisterende konto eller en Google-konto, kan du oprette en ny.

• Privatlivspolitik

Læs og accepter privatlivspolitikken for at kunne fortsætte.

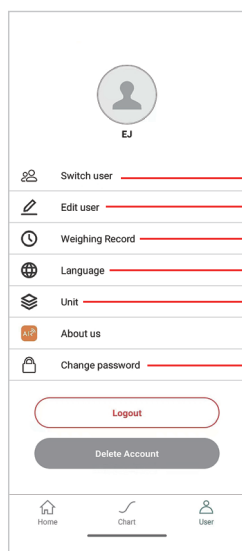

• Skift bruger: Opret eller slet bruger.

• **Rediger bruger:** Rediger oplysningerne for den aktuelle bruger. (Indtast venligst dine korrekte oplysninger for at få et præcist resultat.)

• **Vægtregistreringer:** Se detaljer om hver historisk vejning.

• **Sprog:** Skift sprog.


• **Enhed:** Skift mellem kg og lb.

• **Skift adgangskode:** Rediger adgangskode for den aktuelle bruger.


3

KOM GODT I GANG MED AIRSCALE

Oversigt over vægten

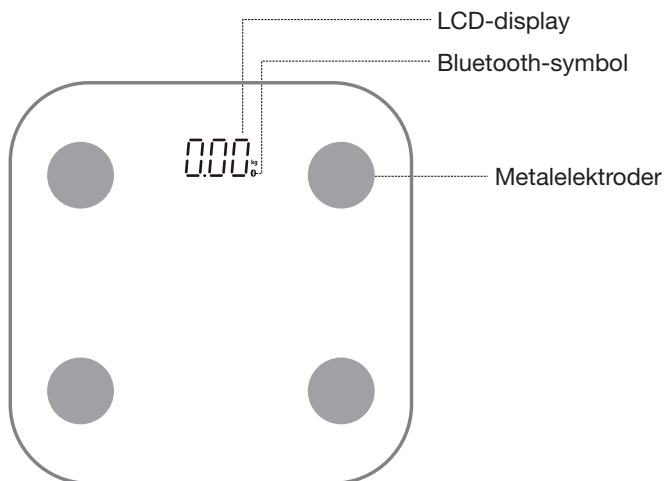

SKIFT ENHED (kg/lb)

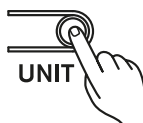

Enhedsmuligheder: kg – lb

I vejnings-mode: Tryk på enhedsknappen for at vælge måleenhed.
Knappen sidder på bagsiden af vægten.

Bemærk: Indstil den ønskede måleenhed, før du vejer dig.
Enheden kan ikke ændres under vejning.

Du kan også ændre enheden i "AirScale"

4

SÅDAN VEJER DU DIG

Trin 1: Sørg for, at dit styresystem er:

Android 12.0 eller nyere
iOS 14.0 eller nyere

Trin 2: Download AirScale-appen fra App Store eller Google Play, og registrér dig ved at indtaste dine grundlæggende oplysninger.



Trin 3: Tryk hurtigt på knappen mindst 3 gange. Skærmen viser "0.0kg" efter først at have vist "8".

(Når skærmen viser " ", skal du trykke hurtigt 3 gange på tænd/sluk-knappen for at aktivere vægten).



Trin 4: Tænd for Bluetooth og lokalitetstjenester på din telefon.

Trin 5: Åbn AirScale-appen, og log ind.




Trin 6: Stil dig op på vægten med bare fødder og sørg for fuld kontakt med metalelektroderne.

Bliv stående uden at bevæge dig, indtil der vises "0000" på vægten, og telefonen viser "analyserer".

Når analysen er færdig, vises din vægt, og telefonen viser vægt- og kropsfedtdata.



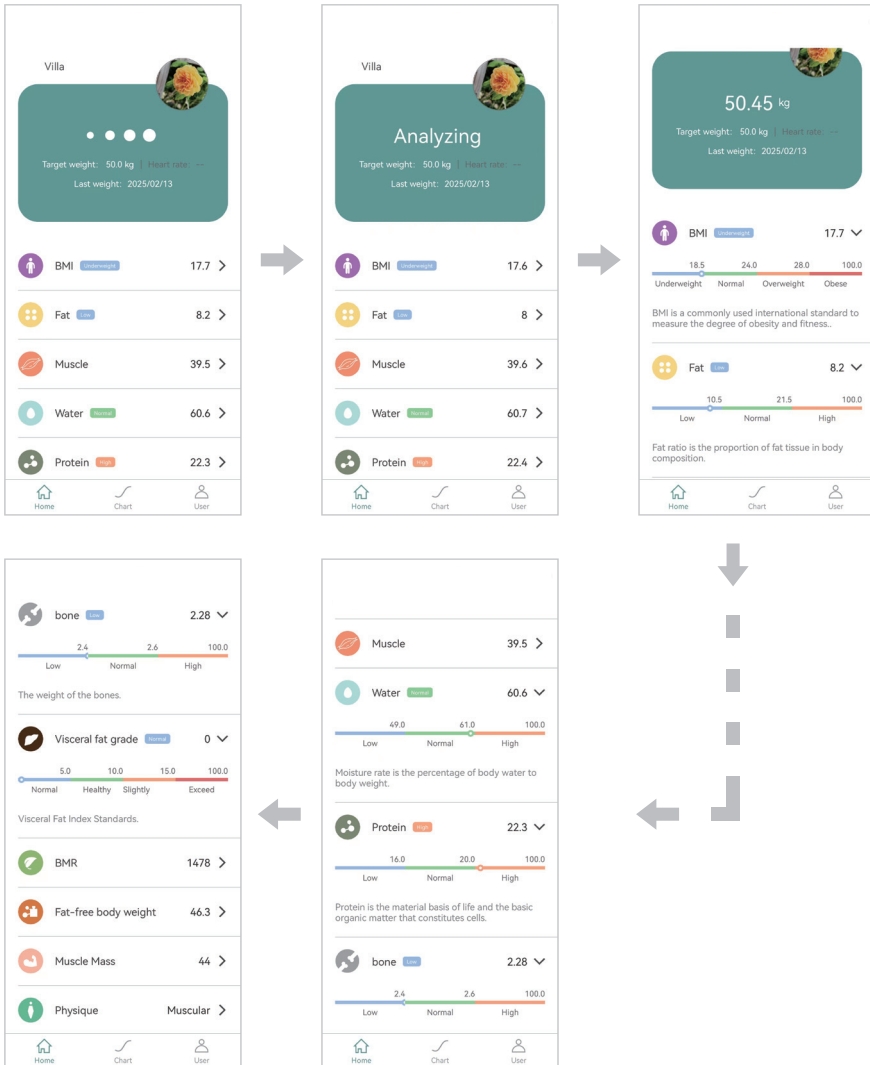

Bemærk:

- For et præcist resultat skal du sørge for, at dine fødder har god kontakt med metal-elektroderne.
- Når vægtdisplayet viser skiftende nuller ("0") på displayet, er vægten i gang med at analysere kropsfedt – bliv stående på vægten for at undgå fejlmålinger.

5

FEJLVISNINGER



Overbelastning

Viser vægten "Err" i displayet, betyder dette overbelastning (mere end 180 kg).



Lavt batteriniveau

Når displayet viser "Lo", slukker vægten automatisk efter 2 sekunder.

Åbn batteridækslet og udskift batterierne med nye i korrekt polaritet.

6

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Brug en let fugtig klud til rengøring af vægten. Lad ikke vand trænge ind i vægten.
- Brug ikke kemiske opløsningsmidler som f.eks. alkohol eller benzen til rengøring af vægten.



Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en autoriseret affaldsplads, der er beregnet til formålet eller til en forhandler med en sådan service.

Kontakt din egen kommune, hvis du har brug for mere information.

REKLAMATIONSRET OG SERVICE

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer og arbejds løn. Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Garantien dækker ikke:

- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Batterier eller andre sliddele

Transportskader

En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service

Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale for servicen.

Erhvervskøb

Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.)

eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE

For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er købt.

Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen 'Service'. Forbehold for trykfejl.

Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes.

Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke overholdes.

